




歯牙抜去にもっとも快適な手段があります

歯牙抜去操作時、軟・硬組織に与える侵襲を最小限に抑えます。

骨組織を保全した良好な抜歯窩が得られます。

力に頼らない歯牙抜去が可能です。

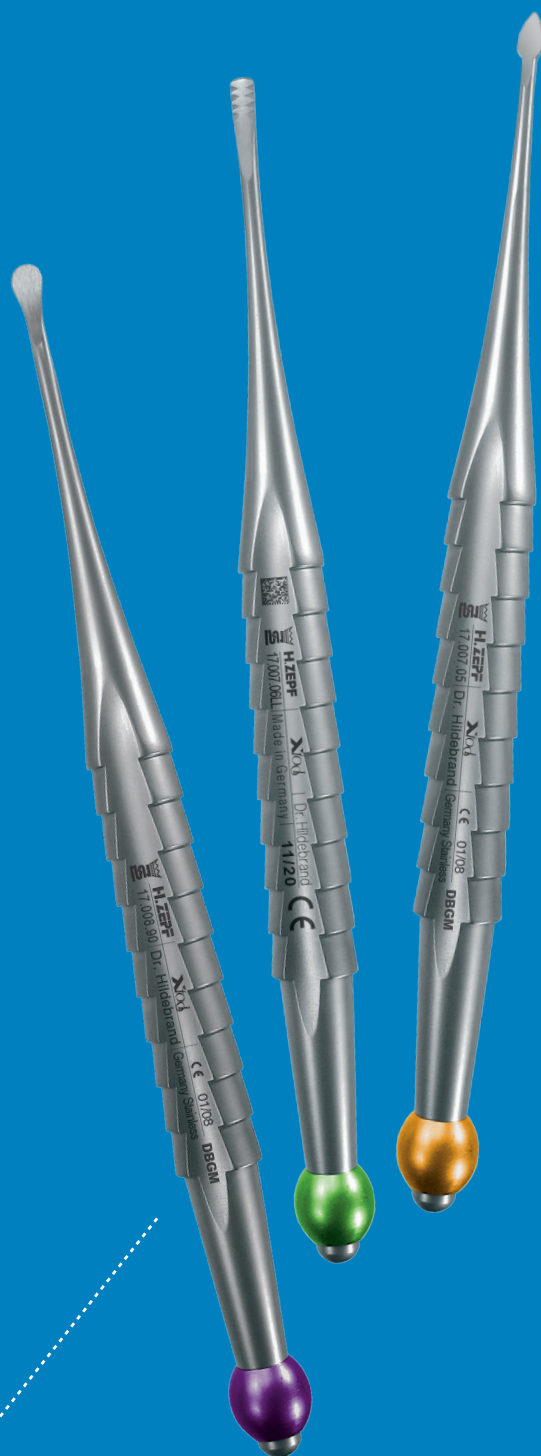


ペングリップのため

- ・繊細な伝達感覚
- ・細かい操作が可能




使用手順

- ① 歯根膜空隙への挿入
- ② 歯周靱帯の切断
- ③ 初期的弛緩操作
- ④ 弛緩操作
- ⑤ 脱臼操作
- ⑥ 抜去

X デズモツール使用

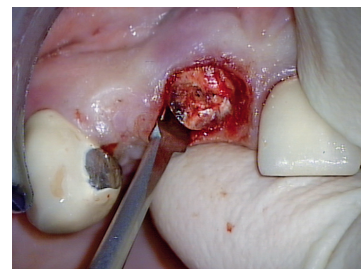

X ラクサツール・
アブロキシマルエレベーター使用

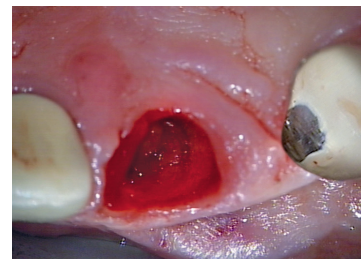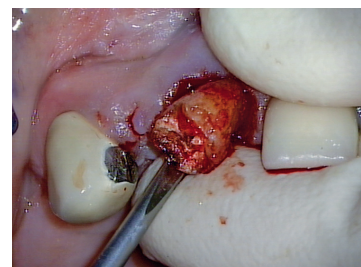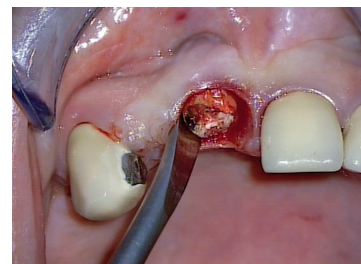

Xツールセット




【セット内容】
 Xデズモツール1 【h1700705】
 Xラクサツール1 【h1700701】
 Xラクサツール3 【h1700703】
 Xラクサツール6 【h1700706】
 Xラクサツール7 【h1700707】
 アプロキシマルエレベーター1 【h1700801】
 アプロキシマルエレベーター2 【h1700802】
 Xスプーン 【h2474778】
 ウォッシュトレイ1/2

Xツールセット I

品番：h1700750 標準価格 ¥118,000 (税込 ¥129,800)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

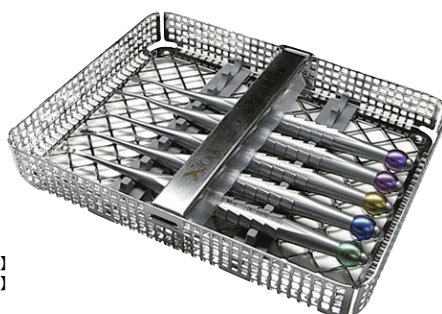

【セット内容】
 Xデズモツール1 【h1700705】
 Xデズモツール3 【h1700805】
 Xラクサツール1 【h1700701】
 Xラクサツール3 【h1700703】
 アプロキシマルエレベーター1 【h1700801】
 ウォッシュトレイ1/2

Xツールセット II

品番：h1700755 標準価格 ¥88,000 (税込 ¥96,800)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

ヘミングウェイ・スプーン / 抜歯窩の診査、搔把用



Xスプーン

品番：h2474778 標準価格 ¥12,000 (税込 ¥13,200)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000255


デズモトーム



デズモトーム1

品番：h1704500 標準価格 ¥11,500 (税込 ¥12,650)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000479

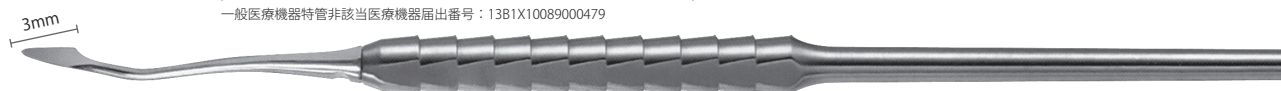

デズモトーム2

品番：h1704504 標準価格 ¥11,500 (税込 ¥12,650)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000479




デズモトーム3

品番：h1704505 標準価格 ¥11,500 (税込 ¥12,650)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000479


Xデズモツール

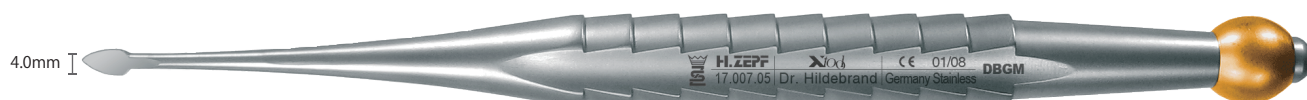

Xデズモツール1 (前歯、小臼歯部)

品番：h1700705 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)


一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

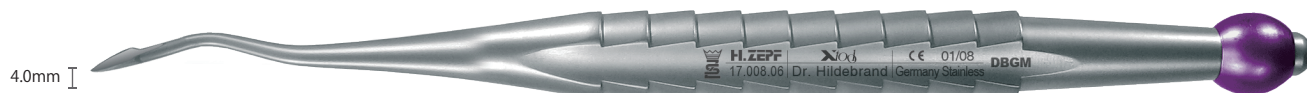

Xデズモツール2 (大臼歯部：近心)

品番：h1700806 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

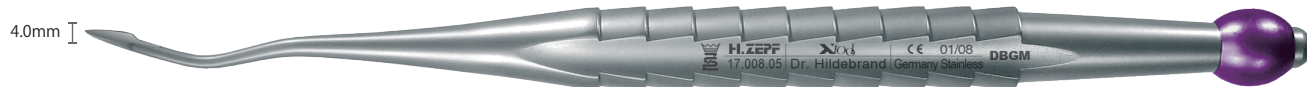

Xデズモツール3 (大臼歯部：遠心)

品番：h1700805 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159



Xアピカルデズモトーム (大臼歯部：根尖)

品番：h1700810 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

Xラクサツール




直 + ナロータイプ

Xラクサツール1 (前歯・小白歯部)

品番：h1700701 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

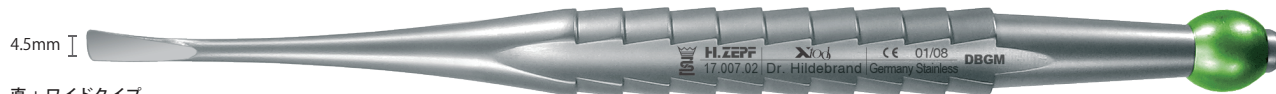

直 + ワイドタイプ

Xラクサツール2 (小白歯・大白歯部)

品番：h1700702 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159



曲 + ナロータイプ

Xラクサツール3 (前歯・小白歯部)

品番：h1700703 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159




曲 + ワイドタイプ

Xラクサツール4 (小白歯・大白歯部)

品番：h1700704 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

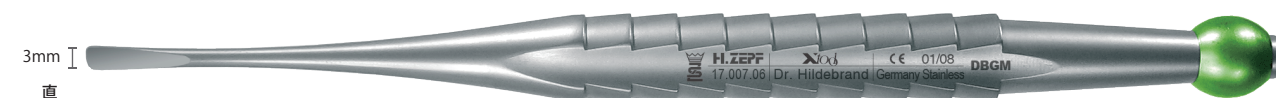

直

Xラクサツール6 (前歯・小白歯部)

品番：h1700706 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159




直

Xラクサツール6 ギザ付 (前歯・小白歯部)

品番：h1700706LL 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

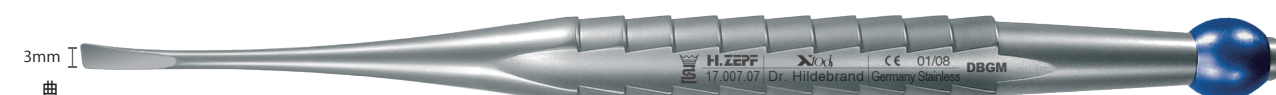

曲

Xラクサツール7 (前歯・小白歯部)

品番：h1700707 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159



曲

Xラクサツール7 ギザ付 (前歯・小白歯部)

品番：h1700707LL 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159




直

Xラクサツール8 (分割歯牙)

品番：h1700890 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

アプロキシマルエレベーター

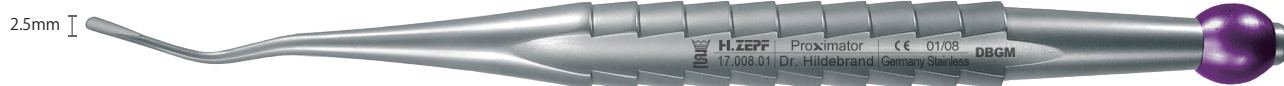

アプロキシマルエレベーター1 (大臼歯部：遠心)

品番：h1700801 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)


一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159



アプロキシマルエレベーター1 ギザ付 (大臼歯部：遠心)

品番：h1700801LL 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

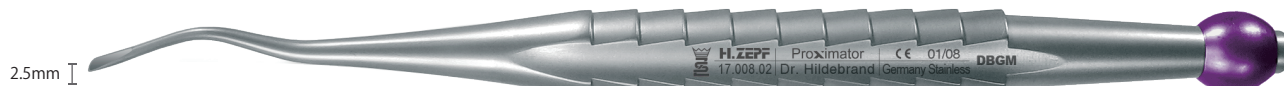

アプロキシマルエレベーター2 (大臼歯部：近心)

品番：h1700802 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)


一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159



アプロキシマルエレベーター2 ギザ付 (大臼歯部：近心)

品番：h1700802LL 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)


一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

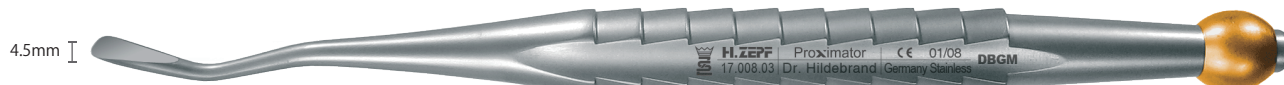

アプロキシマルエレベーター3 (大臼歯部：遠心)

品番：h1700803 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

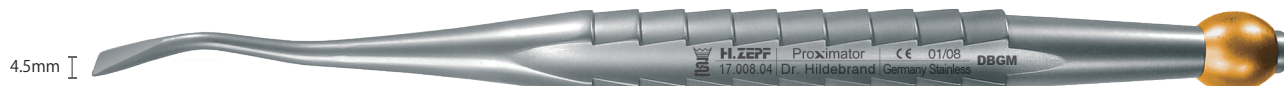

アプロキシマルエレベーター4 (大臼歯部：近心)

品番：h1700804 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159




アプロキシマルエレベーター5 (大臼歯部：根尖)

品番：h1700811 標準価格 ¥15,000 (税込 ¥16,500)


一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000159

抜歯鉗子ロバ

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000808

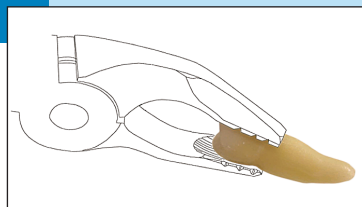

洗練された先端部・細く深いグリップは、的確に歯牙を支えます。

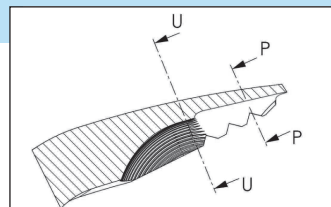

抜歯鉗子ロバの精巧な先端部は、上下顎各歯牙のあらゆる形状・状況に対応できます。


8. | 8.

上顎用Fig.67A

品番：h1226701z


標準価格：¥28,000

(税込 ¥30,800)

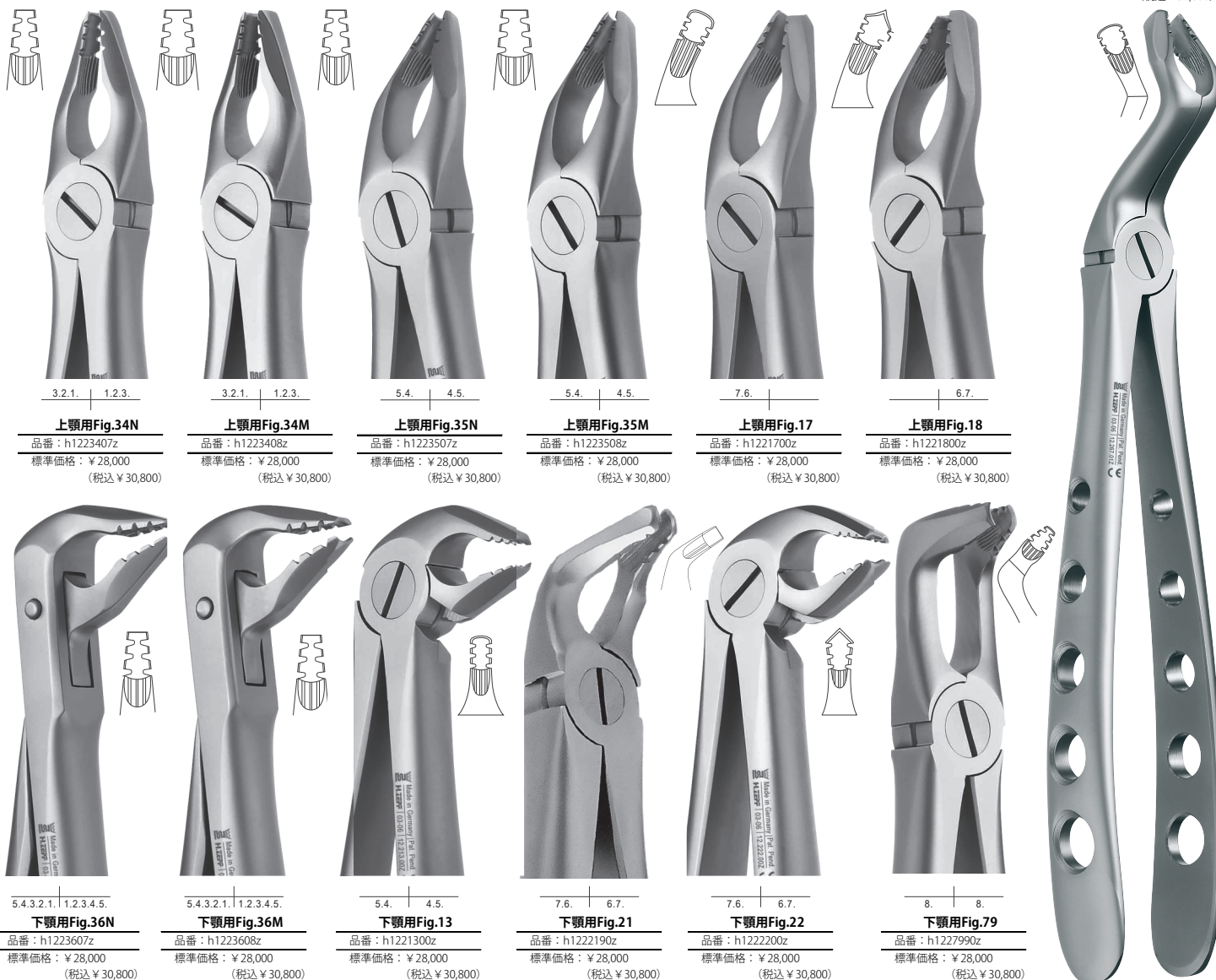

残根鉗子

一般医療機器特管非該当医療機器届出番号：13B1X10089000107

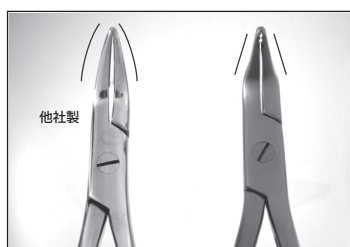

シャープな先端と驚くほどのグリップ力で、細かい操作に対応出来ます。



残根鉗子 上顎用

品番：h1470010z

標準価格：¥28,000

(税込 ¥30,800)

残根鉗子 下顎用

品番：h1470110z

標準価格：¥28,000

(税込 ¥30,800)

～ X ツール 使用上の注意～

X ツールは、従来のエレベーターの代わりとなる器具として開発されました。

特徴は、歯根に沿って挿入しやすく、また歯周靭帯を切断しやすくする為、刃先は薄く作られています。

その為、従来のエレベーター同様、**てこを利用した使い方**で操作すると、

先端部分が曲がったり、破折する原因となります。

過剰な圧力をかけた使い方は避けてください。



臨床動画はこちら



※ 適切な操作をするため、左記写真の様な保持、またはペンダグリップをお勧めします。



1. 歯軸に沿って歯肉溝に挿入して下さい。（上下運動）
2. 根面全体に沿わせながら、根尖方向に挿入して下さい。
3. 小さい圧力（弱い力）でも歯根に沿って深く入ります。



角度を付けた挿入で、てこの様な動きは避けてください。

不適切な使用が原因となる損傷に対しては、責任を負いかねます。

